


Broszura produktowa

08.08.2026

KERN DLB 60-4A

Wagoszuszarka z intuicyjnym wyświetlaczem graficznym, szczególnie odpowiednia do granulatu z tworzyw sztucznych

POLSKI

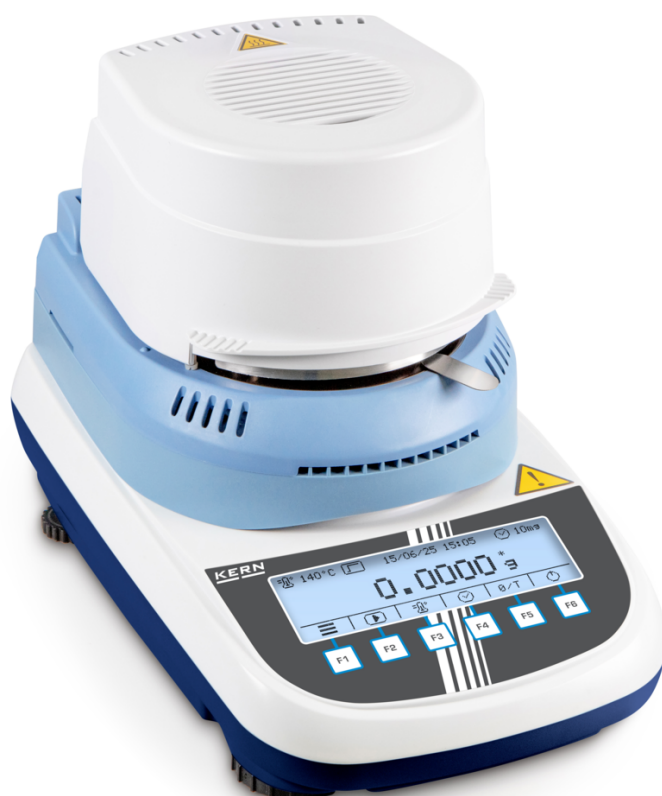

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CECHY

- Wysoce precyzyjne oznaczanie wilgotności, idealne dla przemysłu tworzyw sztucznych
 - Podświetlany graficzny wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 11 mm
 - 6 przycisków bezpośrednich do szybkiego dostępu do głównych funkcji
- Ekran startowy:**
- [[1]] Menu główne
 - [[2]] Uruchom proces suszenia
 - [[3]] Wybierz temperaturę suszenia
 - [[4]] Wybierz kryterium wyłączenia
 - [[5]] Zerowanie/tarowanie
 - [[6]] Stand-by
- Podczas pomiaru:**
- [[7]] Aktualna temperatura
 - [[8]] Aktualny profil grzania
 - [[9]] Aktywne kryterium wyłączenia
 - [[10]] Przerwij proces suszenia
 - [[11]] Wstrzymaj proces suszenia
 - [[12]] Wyświetl aktualne parametry suszenia
 - [[13]] Przełącz jednostkę wskazania wyniku
- Po zakończeniu pomiaru:**
- [[14]] Opuść program suszenia
 - [[15]] Wydrukuj protokół pomiaru
 - [[16]] (De)aktywuj, edytuj parametry GLP
 - [[17]] Wyświetl szczegółowy wynik
 - [[18]] Przełącz jednostkę wskazania wyniku
- Promiennik halogenowy ze szkła kwarcowego 400 W
 - Prowadzenie użytkownika w 6 językach (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
 - Automatyczne tarowanie przy starcie pomiaru przez zamknięcie pokrywy
 - Ostatnia wartość pomiaru pozostaje na wyświetlaczu, dopóki nie zostanie nadpisana przez nowy pomiar
 - [[19]] GLP wewnętrzny; wydruk ID wagi, ID projektu, ID użytkownika, wyznaczonych wartości procesu suszenia itp.
 - 10 szalek na próbki w komplecie
 - Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy
 - Podręcznik zastosowań: W centrum pobierania znajdują Państwo do każdej wagosuszarki KERN praktyczny podręcznik zastosowań z wieloma przykładami, opisami doświadczeń, ustawieniami i wskazówkami

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł spożywczy
- Analiza środowiskowa
- Badania i rozwój
- Przemysł rolny
- Gospodarka wodna

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	możliwa zawartość wilgoci	możliwa zawartość suchej masy	Zakres temperatur (w krokach co)
DLB 60-4A	60 g	0,0001 g	0,01% - 100%	100% - 0,01%	35 °C - 160 °C (1 °C)
DLB 160-3A	160 g	0,001 g	10% - 100%	100% - 10%	35 °C - 160 °C (1 °C)
DLB 160-3A110V	160 g	0,001 g	10% - 100%	100% - 10%	35 °C - 160 °C (1 °C)

AKCESORIA

Model	Opis
316-05	Odważnik kontrolny 316-05 (klasa OIML E2, wartość nominalna 20 g, kształt kompaktowy, stal nierdzewna polerowana)
572-926	Kabel interfejsowy RS-232 572-926
822-903	Kabel zasilający (UK) 822-903
ALJ-A01	Pokrowiec ochronny ALJ-A01
ALJ-A01S05	Pokrowiec ochronny ALJ-A01S05, zakres dostawy 5 sztuk
DLB-A01N.	Zestaw do kalibracji temperatury DLB-A01N.
RH-A01	Szalka na próbki z aluminium RH-A01
RH-A02	Okrągły filtr z włókna szklanego KERN RH-A02
RH-A03	Okrągły filtr z włókna szklanego KERN RH-A03
YKC-01	Drukarka termiczna YKC-01
YKG-01	Drukarka mozaikowa YKG-01
YKH-01	Drukarka termiczna YKH-01

Model	Opis
YKI-02	Adapter RS232-Bluetooth YKI-02
YKI-10	Konwerter RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 w standardzie, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Konwerter RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 w standardzie - 2x)
YKI-12	Konwerter RS232-WLAN YKI-12
YKK-01	Kabel zasilający (CH) YKK-01
YKT-01	Drukarka igłowa YKT-01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
SCD-4.0-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-DLS05	Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)

USŁUGI

Model	Opis
963-103	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-103
964-305	Fabryczne świadectwo wzorcowania (temperatura) 964-305
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-108	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-108

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali
	Protokół GLP/ISO: Urządzenie pomiarowe generuje wydruk zgodny z GLP
	Wartość i czas: Urządzenie pomiarowe podaje wartość, datę i godzinę, niezależnie od podłączonej drukarki
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Zintegrowany zasilacz: Wbudowany w urządzenie. 230 V/50 Hz w UE. Inne standardy, jak np. GB, USA, AUS na zapytanie
	Zasada ważenia elektromagnetyczna kompensacja siły: Cewka w magnesie trwałym. Do najdokładniejszych wagań
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze