

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN SET-40

EasyTouch Protect – bezpieczna i wydajna ochrona wrażliwych danych firmowych




POLSKI

Software EasyTouch SET-40 **Protect**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

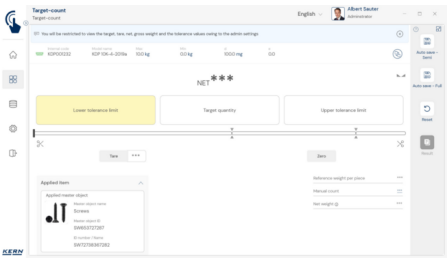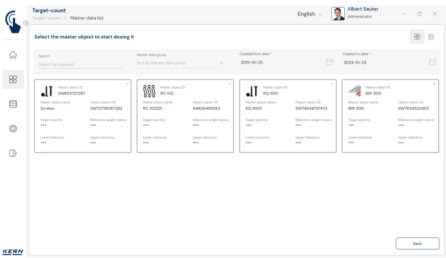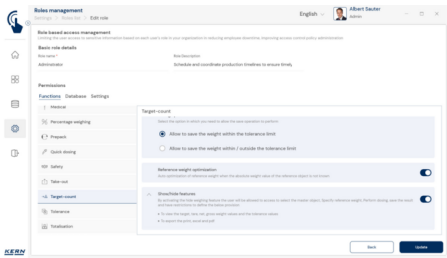

CECHY

- Wskazówka: Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base
- SET-40 Protect jest kompatybilny z następującymi zestawami: SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count i SET-31 Tolerance
- Ochrona wrażliwych receptur: dzięki tej funkcji można ukryć wszystkie krytyczne dane receptur, aby zapobiec niepożądanemu dostępowi do nich
- Ochrona wrażliwych danych ważenia: przy dozowaniu lub ważeniu docelowe wartości ważenia są neutralizowane jako „***”, tak że widoczny jest tylko graficznie przedstawiony wynik na podstawie wartości docelowej oraz dolnej i górnej wartości tolerancji
- Ochrona wrażliwych nazw obiektów: nazwa substancji lub obiektu jest maskowana dla określonych grup użytkowników, tak że w wariancie minimalnym widoczny jest jedynie numer ID substancji bez docelowych wartości ważenia
- Elastyczne opcje ochrony danych: zależnie od roli użytkownika można wybrać, czy wyświetlane mają być tylko docelowe wartości ważenia, czy także oznaczenia np. poszczególnych składników receptury
- Wprowadzanie łącznej ilości docelowej: na ekranie startowym użytkownicy wprowadzają łączną ilość docelową, nie widząc pojedynczych ilości docelowych ani mas składników
- Zamaskowane wyniki: na ekranie wyników masy docelowe i faktycznie zważone masy również są przedstawiane wyłącznie w zamaskowanej postaci jako „***”
- Ograniczone wyświetlanie ilości w pamięci: w Dynamic Memory określonym grupom użytkowników nie są wyświetlane dane ilościowe
- Przejrzysty widok dla adminów: wyświetlanie jawnym tekstem ilości lub mas docelowych oraz faktycznie zważonych mas jest w każdej chwili możliwe dla zatwierdzonych grup użytkowników, takich jak admini

Opcje

- Centralna funkcja zapisu danych Save Server (SET-10) do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez EasyTouch oraz ze wszystkich zainstalowanych funkcji EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedyncze dane pomiarowe z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny
- Save-Cloud: ma tę samą centralną funkcję zapisu danych dla wszystkich systemów wagowych podłączonych do KERN EasyTouch co Save-Server. Różnica polega na tym, że w Save-Data Cloud miejscem zapisu jest serwer KERN dostępny przez internet, a nie serwer w sieci lokalnej. Konfiguracja funkcjonalności Save-Data Cloud odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga administratora sieci po stronie użytkownika, KERN SET-101
- EasyTouch Quick Key (SET-311): ta funkcja pozwala zarezerwować określone obiekty danych podstawowych dla określonych ról użytkowników. Wybrane obiekty są wyświetlane tym użytkownikom jako przyciski szybkiego dostępu na ekranie

Informacje licencyjne

- Zakres licencji: jedna licencja może działać na jednym urządzeniu końcowym (PC, laptop, tablet z Androidem)
- Użytkownicy: w ramach jednej licencji można utworzyć nieograniczoną liczbę użytkowników
- Wagi: w ramach jednej licencji można utworzyć i obsługiwać dowolną liczbę wag
- Komunikacja waga-urządzenie końcowe: waga (wagi) może komunikować się z PC, laptopem lub tabletem przez złącze szeregowe, USB, Bluetooth, Ethernet lub WLAN

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Przegląd piktogramów KERN

-
-  EasyTouch: Przystosowana do połączenia, przesyłania danych i sterowania przez komputer lub tablet
-
-  Centralne zarządzanie użytkownikami funkcji KERN EasyTouch. Do użytkownika można przypisać podstawowe dane, jak np. Imię, nazwisko, zdjęcie do zapisania. Każdemu użytkownikowi przypisywana jest rola użytkownika, która dysponuje indywidualnie konfigurowalnymi uprawnieniami w aplikacji KERN EasyTouch. Dzięki tej strukturze można zakładać użytkowników Standard-User, Supervisor-User itp. Logowanie do aplikacji KERN EasyTouch odbywa się przez nazwę użytkownika i Hasło.
-
-  W tej pamięci zapisywane są wszystkie wydrukowane i zapisane dane ważenia oraz dane pomiarowe. Zapis odbywa się albo na lokalnym mierniku, albo centralnie – dla wszystkich podłączonych systemów wagowych – w katalogu serwerowym (Save-Data Server lub Save-Data Cloud). Dane dynamiczne można w każdej chwili ponownie wywołać i wydrukować lub wyeksportować w formie tabeli.
-
-  Wszystkie dane w pamięci są zapisywane w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Zmiany danych podstawowych są również zabezpieczane przed manipulacją w dynamicznej pamięci danych (Data Traceability)
-
-  Kwalifikacja urządzeń: zgodna z normą koncepcja kwalifikacji obejmująca następujące usługi walidacyjne: kwalifikacja instalacyjna (IQ), kwalifikacja operacyjna (OQ)
-
-  Centralna funkcja zapisu danych do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez KERN EasyTouch oraz z wszystkich zainstalowanych funkcji KERN EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedynczych danych pomiarowych z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save-Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny.