

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN SET-411

EasyTouch Hotkeys – klawisze skrótu i przełączniki zewnętrzne


POLSKI

Software EasyTouch SET-411 Hotkeys

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

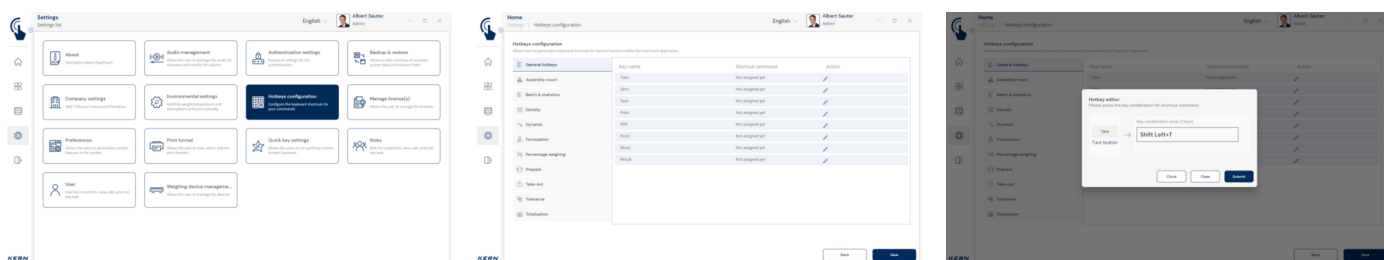

CECHY

- Wskazówka: Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base
- Klawisze skrótów: Hotkeys umożliwia przypisanie kombinacji klawiszy do wszystkich przycisków w EasyTouch. Znacznie upraszcza to dostęp do często używanych funkcji, ponieważ odpada uciążliwa nawigacja myszą PC. Zamiast tego żądane akcje można wywoływać szybko i bezpośrednio z klawiatury
- Artykuł opcjonalny: Hotkeys to opcjonalne rozszerzenie EasyTouch, które obsługuje wszystkie aktywne i zainstalowane funkcje. Prosimy pamiętać, że cena funkcji dodatkowej nie obejmuje sprzętu, takiego jak przełączniki, przyciski czy pedały nożne
- Konfiguracja klawiszy skrótów: kombinacje klawiszy może określić administrator systemu lub osoba upoważniona. Dla każdej żądanej funkcji można przy tym ustalić jednoznaczną, specyficzną dla użytkownika kombinację klawiszy
- Wszechstronny wybór Hotkeys: w EasyTouch można definiować nie tylko specyficzne klawisze akcji do określonych funkcji, lecz także ogólne polecenia klawiszowe jak „Zapisz” lub „Tara” jako Hotkeys. Są one wtedy stosowalne we wszystkich funkcjach EasyTouch
- Aktywacja przez kombinację klawiszy: przykładowo funkcję TARE można aktywować łatwo i szybko kombinacją klawiszy
- Integracja zewnętrznych przełączników lub przycisków: EasyTouch obsługuje przypisanie kombinacji klawiszy do sygnałów zewnętrznych urządzeń HID (Human Interface Devices) przez USB. Dzięki temu oprogramowanie można obsługiwać zewnętrznymi przełącznikami, jak przyciski awaryjnego wyłączenia lub przełączniki nożne, co umożliwia pracę bez użycia rąk i zwiększa wydajność. Przebieg: w oprogramowaniu sterującym dostępnego w handlu urządzenia USB sygnał zewnętrzny przypisuje się do kombinacji klawiszy. Odbiera ją komputer. Tam sygnał uruchamia przypisaną funkcję EasyTouch

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Przegląd piktogramów KERN

-
-  EasyTouch: Przystosowana do połączenia, przesyłania danych i sterowania przez komputer lub tablet
-
-  Centralne zarządzanie użytkownikami funkcji KERN EasyTouch. Do użytkownika można przypisać podstawowe dane, jak np. Imię, nazwisko, zdjęcie do zapisania. Każdemu użytkownikowi przypisywana jest rola użytkownika, która dysponuje indywidualnie konfigurowalnymi uprawnieniami w aplikacji KERN EasyTouch. Dzięki tej strukturze można zakładać użytkowników Standard-User, Supervisor-User itp. Logowanie do aplikacji KERN EasyTouch odbywa się przez nazwę użytkownika i Hasło.
-
-  W tej pamięci zapisywane są wszystkie wydrukowane i zapisane dane ważenia oraz dane pomiarowe. Zapis odbywa się albo na lokalnym mierniku, albo centralnie – dla wszystkich podłączonych systemów wagowych – w katalogu serwerowym (Save-Data Server lub Save-Data Cloud). Dane dynamiczne można w każdej chwili ponownie wywołać i wydrukować lub wyeksportować w formie tabeli.
-
-  Wszystkie dane w pamięci są zapisywane w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Zmiany danych podstawowych są również zabezpieczane przed manipulacją w dynamicznej pamięci danych (Data Traceability)
-
-  Kwalifikacja urządzeń: zgodna z normą koncepcja kwalifikacji obejmująca następujące usługi walidacyjne: kwalifikacja instalacyjna (IQ), kwalifikacja operacyjna (OQ)
-
-  Centralna funkcja zapisu danych do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez KERN EasyTouch oraz z wszystkich zainstalowanych funkcji KERN EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedynczych danych pomiarowych z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save-Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny.