

Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN SET-18

POLSKI

Software EasyTouch


SET-18

**Container  
Master**

## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

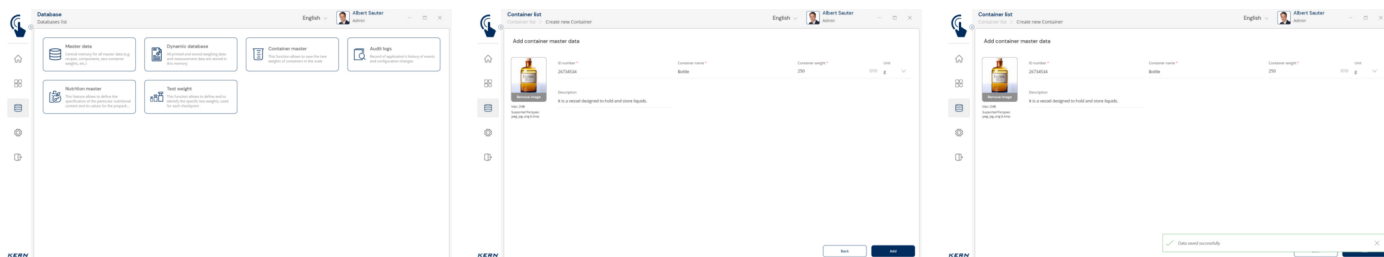

## CECHY

- Wskazówka: Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base
- Zarządzanie pojemnikami: różne artykuły są składowane i ważone w jednakowych pojemnikach (kontenerach). Masa tary tych pojemników można centralnie zarządzać za pomocą SET-18 Container Master. Gdy zmieni się masa pojemnika, nową masę tary wystarczy zaktualizować w Container Master i jest ona automatycznie stosowana przy wszystkich powiązanych artykułach i funkcji aplikacji
- Stałe przypisanie: każdemu obiektowi danych podstawowych można na stałe przypisać pojemnik, aby zapewnić spójność
- Wyświetlanie pojemnika: podczas korzystania z obiektu danych podstawowych użytkownicy widzą w EasyTouch pojemnik przypisany na stałe lub pojemnik wybrany ręcznie. Zmniejsza to ryzyko pomyłek i poprawia dokładność w procesie pracy
- Wybór pojemnika: użytkownicy mogą również bez wcześniejszego ustalenia wybrać pojemnik bezpośrednio w trakcie ważenia, na przykład przez zeskanowanie ID pojemnika kodem kreskowym. Pomaga to uniknąć błędnych wpisów tary

### Informacje licencyjne

- Zakres licencji: jedna licencja może działać na jednym urządzeniu końcowym (PC, laptop, tablet z Androidem)

## PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



## Przegląd piktogramów KERN

- 

EasyTouch: Przystosowana do połączenia, przesyłania danych i sterowania przez komputer lub tablet
- 

Centralne zarządzanie użytkownikami funkcji KERN EasyTouch. Do użytkownika można przypisać podstawowe dane, jak np. Imię, nazwisko, zdjęcie do zapisania. Każdemu użytkownikowi przypisywana jest rola użytkownika, która dysponuje indywidualnie konfigurowalnymi uprawnieniami w aplikacji KERN EasyTouch. Dzięki tej strukturze można zakładać użytkowników Standard-User, Supervisor-User itp. Logowanie do aplikacji KERN EasyTouch odbywa się przez nazwę użytkownika i Hasło.
- 

W tej pamięci zapisywane są wszystkie wydrukowane i zapisane dane ważenia oraz dane pomiarowe. Zapis odbywa się albo na lokalnym mierniku, albo centralnie – dla wszystkich podłączonych systemów wagowych – w katalogu serwerowym (Save-Data Server lub Save-Data Cloud). Dane dynamiczne można w każdej chwili ponownie wywołać i wydrukować lub wyeksportować w formie tabeli.
- 

Wszystkie dane w pamięci są zapisywane w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Zmiany danych podstawowych są również zabezpieczane przed manipulacją w dynamicznej pamięci danych (Data Traceability)
- 

Kwalifikacja urządzeń: zgodna z normą koncepcja kwalifikacji obejmująca następujące usługi walidacyjne: kwalifikacja instalacyjna (IQ), kwalifikacja operacyjna (OQ)
- 

Centralna funkcja zapisu danych do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez KERN EasyTouch oraz z wszystkich zainstalowanych funkcji KERN EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedynczych danych pomiarowych z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save-Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny.