

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN SET-311

EasyTouch Quick Key – szybki wybór obiektów danych podstawowych zależnie od użytkownika


POLSKI

Software EasyTouch SET-311 **Quick Key**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

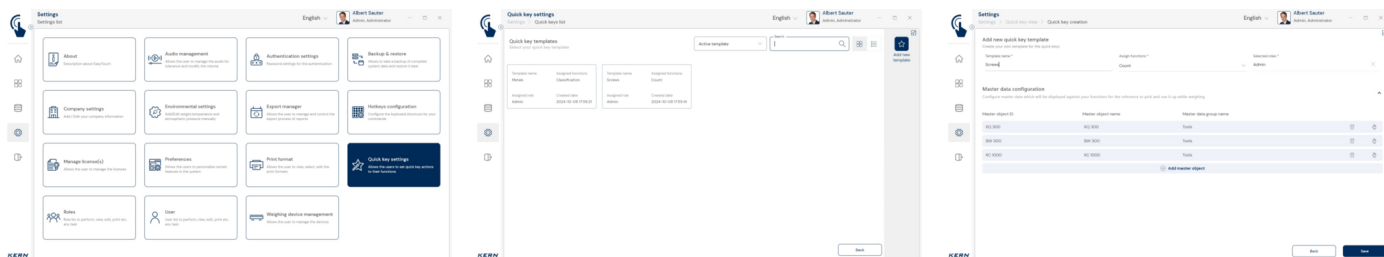

CECHY

- Wskazówka: Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base
- Quick Keys można tworzyć w licznych zestawach, np.
 - SET-01 Base
 - SET-05 Dynamic
 - SET-06 Classification
 - SET-07 Variable
 - SET-08 Take Out
 - SET-31 Tolerance
 - SET-32 Count
 - SET-33 Target Count
- Przyciski szybkiego wyboru danych podstawowych: dzięki ET Quick Key określone obiekty danych podstawowych mogą być na stałe wyświetlane do szybkiego wyboru. Quick Keys są wyświetlane bezpośrednio na ekranie
- Zapis: niezależnie od tego, czy wyboru dokonano konwencjonalnie, czy przez Quick Key, każdy wynik ważenia lub liczenia sztuk jest zapisywany z odniesieniem do wybranego obiektu danych podstawowych
- Wybór obiektów danych podstawowych: określone obiekty danych podstawowych, które mają być wyświetlane jako Quick Key, można wybrać pojedynczo albo jako zdefiniowaną grupę danych podstawowych, która zawiera dane podstawowe jako Quick Keys
- Powiązanie z użytkownikiem: Quick Keys można tworzyć jako schemat odnoszący się do określonych ról użytkowników. Oznacza to, że użytkownikom danej roli wyświetlane są do szybkiego wyboru określone obiekty danych podstawowych. Dzięki temu np. różne działy w tym samym przedsiębiorstwie mogą pracować z różnymi danymi podstawowymi bez wzajemnego nakładania się
- Zapis i drukowanie: dla każdego schematu można ustawić, czy oprócz operacji zapisu ma również nastąpić automatyczny wydruk, czy nie
- Komunikacja waga-urządzenie końcowe: waga (wagi) może komunikować się z PC, laptopem lub tabletem przez złącze szeregowe, USB, Bluetooth, Ethernet lub WLAN

Informacje licencyjne

- Zakres licencji: jedna licencja może działać na jednym urządzeniu końcowym (PC, laptop, tablet z Androidem)
- Wagi: w ramach jednej licencji można utworzyć i obsługiwać dowolną liczbę wag

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Przegląd piktogramów KERN

- 

EasyTouch: Przystosowana do połączenia, przesyłania danych i sterowania przez komputer lub tablet
- 

Centralne zarządzanie użytkownikami funkcji KERN EasyTouch. Do użytkownika można przypisać podstawowe dane, jak np. Imię, nazwisko, zdjęcie do zapisania. Każdemu użytkownikowi przypisywana jest rola użytkownika, która dysponuje indywidualnie konfigurowalnymi uprawnieniami w aplikacji KERN EasyTouch. Dzięki tej strukturze można zakładać użytkowników Standard-User, Supervisor-User itp. Logowanie do aplikacji KERN EasyTouch odbywa się przez nazwę użytkownika i Hasło.
- 

W tej pamięci zapisywane są wszystkie wydrukowane i zapisane dane ważenia oraz dane pomiarowe. Zapis odbywa się albo na lokalnym mierniku, albo centralnie – dla wszystkich podłączonych systemów wagowych – w katalogu serwerowym (Save-Data Server lub Save-Data Cloud). Dane dynamiczne można w każdej chwili ponownie wywołać i wydrukować lub wyeksportować w formie tabeli.
- 

Wszystkie dane w pamięci są zapisywane w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Zmiany danych podstawowych są również zabezpieczane przed manipulacją w dynamicznej pamięci danych (Data Traceability)
- 

Kwalifikacja urządzeń: zgodna z normą koncepcja kwalifikacji obejmująca następujące usługi walidacyjne: kwalifikacja instalacyjna (IQ), kwalifikacja operacyjna (OQ)
- 

Centralna funkcja zapisu danych do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez KERN EasyTouch oraz z wszystkich zainstalowanych funkcji KERN EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedynczych danych pomiarowych z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save-Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny.