

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN SET-14

EasyTouch Individual Print – wydruki z możliwością personalizacji

POLSKI

Software EasyTouch


SET-14

**Individual
Print**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

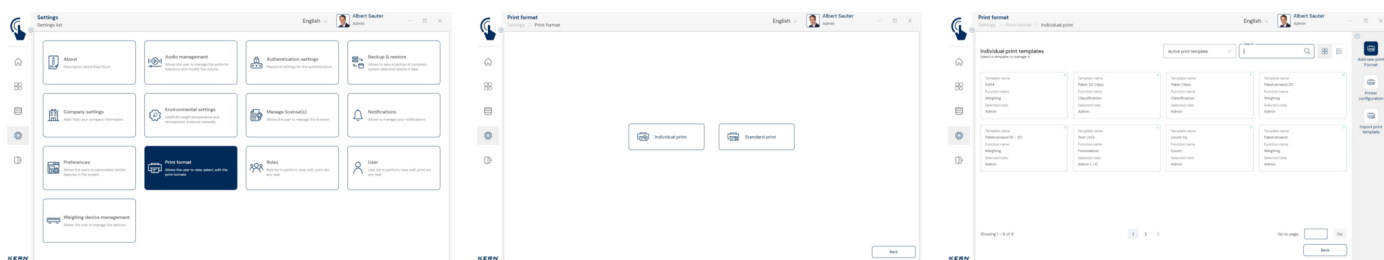

CECHY

- Wskazówka: Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base
- Indywidualne rozmieszczanie elementów wydruku: z EasyTouch Individual Print projektują Państwo swój wydruk całkowicie według własnych wyobrażeń i wytycznych. Mogą Państwo dowolnie rozmieścić dane takie jak masa, liczba sztuk, cena, użytkownik i/lub data i godzina
- Dowolnie wybierane rozmiary papieru od 20×20 mm do 210×297 mm (DIN A4): dla wydruków takich jak etykiety samoprzylepne rozmiar strony można ustawić według potrzeb, włącznie z definiowanym automatycznym przesuwem od etykiety do etykiety
- Funkcja kodów kreskowych pozwala drukować każdy element wydruku (np. numer artykułu, masę netto, wynik liczenia sztuk) jako kod kreskowy lub kod QR. Elementy kodu kreskowego można również rozmieszczać dowolnie i w dowolnym rozmiarze w obszarze wydruku. Do wyboru są różne typy kodów kreskowych
- Zewnętrzne przenoszenie szablonów wydruku: możliwość przeniesienia szablonów wydruku z jednej lokalnej instalacji EasyTouch na inną, o ile nie istnieje centralna baza danych
- Personalizowane ustawienia użytkowników i funkcji: poszczególnym grupom użytkowników można przypisać indywidualne formaty wydruku dla określonych funkcji
- Informacje o firmie: wszystkie dane firmy do wyboru, np. adres internetowy, logo itp.
- Indywidualna funkcja grafiki i zdjęć: w każdym obrazie wydruku można umieścić własne zdjęcia, logo lub ikony. Te elementy graficzne można dowolnie rozmieszczać w żądanym rozmiarze
- Drukarka: Zebra ZD421 dopuszczona przez KERN. W sprawie innych modeli drukarek prosimy o kontakt ze wsparciem KERN

Opcje

- Wsparcie KERN przy indywidualnym projektowaniu wydruku: chętnie pomożemy Państwu w stworzeniu własnego wydruku. Prosimy o kontakt: ETsupport@kern-sohn.com

Informacje licencyjne

- Zakres licencji: jedna licencja może działać na jednym urządzeniu końcowym (PC, laptop, tablet z Androidem)
- Użytkownicy: w ramach jednej licencji można utworzyć nieograniczoną liczbę użytkowników

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Przegląd piktogramów KERN

-  EasyTouch: Przystosowana do połączenia, przesyłania danych i sterowania przez komputer lub tablet
-
-  Centralne zarządzanie użytkownikami funkcji KERN EasyTouch. Do użytkownika można przypisać podstawowe dane, jak np. Imię, nazwisko, zdjęcie do zapisania. Każdemu użytkownikowi przypisywana jest rola użytkownika, która dysponuje indywidualnie konfigurowalnymi uprawnieniami w aplikacji KERN EasyTouch. Dzięki tej strukturze można zakładać użytkowników Standard-User, Supervisor-User itp. Logowanie do aplikacji KERN EasyTouch odbywa się przez nazwę użytkownika i Hasło.
-
-  W tej pamięci zapisywane są wszystkie wydrukowane i zapisane dane ważenia oraz dane pomiarowe. Zapis odbywa się albo na lokalnym mierniku, albo centralnie – dla wszystkich podłączonych systemów wagowych – w katalogu serwerowym (Save-Data Server lub Save-Data Cloud). Dane dynamiczne można w każdej chwili ponownie wywołać i wydrukować lub wyeksportować w formie tabeli.
-
-  Wszystkie dane w pamięci są zapisywane w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Zmiany danych podstawowych są również zabezpieczane przed manipulacją w dynamicznej pamięci danych (Data Traceability)
-
-  Kwalifikacja urządzeń: zgodna z normą koncepcja kwalifikacji obejmująca następujące usługi walidacyjne: kwalifikacja instalacyjna (IQ), kwalifikacja operacyjna (OQ)
-
-  Centralna funkcja zapisu danych do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez KERN EasyTouch oraz z wszystkich zainstalowanych funkcji KERN EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedynczych danych pomiarowych z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save-Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny.